



TSUTSUI SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD.

筒井理化学器械株式会社

ふるい振とう器  $\phi$ 200 試験ふるい対応

Desktop type Sieves shaker  $\phi$  200 Sieves

# VSS-200S



## コンパクト & 強力

卓上サイズのコンパクトボディに 220W モータを搭載し、強力なパワーを発揮します。

## 振動調整コントローラ & デジタルタイマ

操作パネルに取り付けられた振動調節コントローラによりサンプルにあわせた振動強度を生み出します。また、デジタルタイマにより振動時間を正確に設定することで操作の再現性を高めます。




TSUTSUI SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD.

筒井理化学器械株式会社

## 仕様

形式	VSS-200S 型	振幅	～3mm
適用ふるい	試験用ふるい (JIS-Z8801) φ200mm×深さ 60mm 6 個 (受器含まず) φ200mm×深さ 45mm 7 個 (受器含まず) φ150mm×深さ 60mm 6 個 (受器含まず) φ150mm×深さ 45mm 7 個 (受器含まず) ニューテストイングシーブ (ナイロン網ふるい) φ200mm×深さ 45mm 7 個 (受器含まず)	モータ	振動モータ 100V/220W
振動数	2,000～3,600 回/分 (無負荷時) 無段調節コントローラ付き	デジタルタイマ	秒単位設定 最大設定時間 99 分 59 秒
		電源	100V/250VA
		寸法	W450×D380×H590 (ふるい 5 段時)
		重量	約 40Kg

## 操作パネル

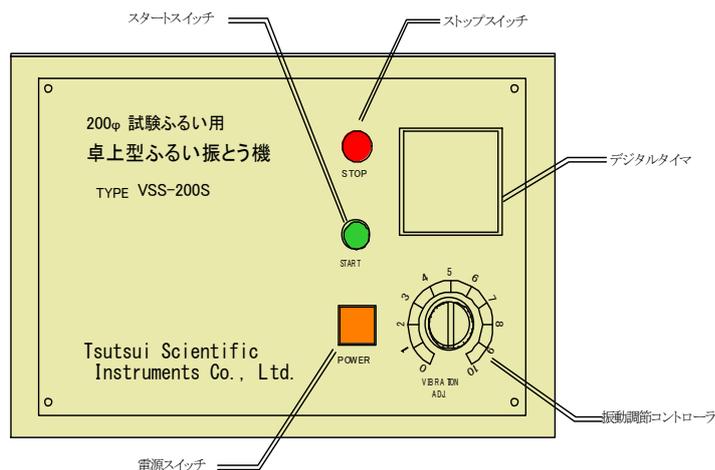

## 関連製品

- ▷ ロッド付き  
短 3 段用・長 7 段用 (受器含む)  
購入時にふるい段数をご指定戴ければ  
段数に合わせたロッドが付属します。
- ▷ ブラシクリーナ、ノブクリーナ (別売)  
ふるいの中に投入することにより目詰まり  
を減らし、分級効果をアップさせます。

## ご注意

連続排出の場合は機種が異なりますお申し出下さい。

※本製品にふるいは付属していません。

※φ150mmふるいを使用する場合、専用のアダプタが必要になります。

※ふるい段数を変えたい場合は、ふるい段数にあわせたロッドを別途ご購入下さい。

※超微粉 (約 45 μ 以下) の場合は音波ふるい器, SW-20A T の使用をご検討下さい。

## お問い合わせ

筒井理化学器械株式会社

〒110-0003 東京都台東区根岸 1-1-31

TEL 03-3845-2011 FAX 03-3842-5852

URL <http://www.e-tsutsui.com/>

E-mail [sales@e-tsutsui.com](mailto:sales@e-tsutsui.com)

2014.10