



TSUTSUI SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD.

筒井理化学器械株式会社

## ふるい振とう器

φ200 試験用ふるい対応

Sieves shaker φ 200 Sieves

# VSS-200S

### コンパクトサイズ&強力なふるい分け

卓上サイズのコンパクトな本体に 220W モーターを搭載しました。強力なパワーを発揮します。



### 振動調整コントロール&デジタルタイマ搭載

操作パネルに取り付けられた振動調整コントローラにより、サンプルに合わせた振動強度を生み出します。またデジタルタイマにより振動時間を正確に設定することで操作の再現性を高めます。

### 容易な操作方法


組み立て・分解・ふるいの洗浄まで簡単に行えます。  
ふるいの段数に合わせて締め付け用ロッドをセットします。



## 仕様

形式	VSS-200S 型	振幅	約 3mm
適用ふるい	試験用ふるい (JIS-Z8801) φ 200mm×深さ 60mm 6 個 (受器含まず) φ 200mm×深さ 45mm 7 個 (受器含まず) φ 150mm×深さ 60mm 6 個 (受器含まず) φ 150mm×深さ 45mm 7 個 (受器含まず) ニューテストイングシープ (ナイロン網ふるい) φ 200mm×深さ 45mm 7 個 (受器含まず)	モータ	振動モータ 100V/220W
振動数	2,000~3,600 回/分 (無負荷時) 無段調節コントローラ付き	デジタルタイマ	秒単位設定 最大設定時間 99 分 59 秒
		電源	100V/250VA
		寸法	W450×D380×H590 (ふるい 5 段時)
		重量	約 40Kg

## 操作パネル

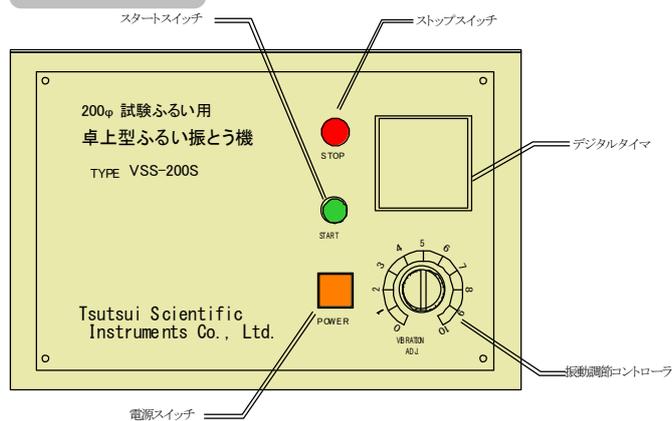

## 関連製品

- ▷ ロッド付き  
短 3 段用・長 7 段用 (受器含む)  
購入時にふるい段数をご指定戴ければ  
段数に合わせたロッドが付属します。
- ▷ ブラシクリーナ, ノブクリーナ (別売)  
ふるいの中に投入することにより目詰まり  
を減らし, 分級効果をアップさせます。

## ご注意

連続排出の場合は機種が異なりますお申し出下さい。

※本製品にふるいは付属しておりません。

※φ 150mmふるいを使用する場合、専用のアダプタが必要になります。

※ふるい段数を変えたい場合は、ふるい段数にあわせたロッドを別途ご購入下さい。

※超微粉 (約 45 μ 以下) の場合は音波ふるい器, SW-20A T の使用をご検討下さい。

## お問い合わせ

筒井理化学器械株式会社

〒110-0003 東京都台東区根岸 1-1-31

TEL 03(3845)2011 FAX 03(3842)5852

E-mail sales@e-tsutsui.com