



TSUTSUI SCIENTIFIC INSTRUMENTS Co., Ltd.

筒井理化学器械株式会社

ふるい振とう器 ϕ 300 試験用ふるい対応

Sieves shaker ϕ 300 Sieves

VSS-300S



従来の ϕ 200mm 試験ふるいではサンプル量が少なく、もっと大量のサンプルでテストを行いたいという要望にこたえて開発されたふるい振とう機です。コンパクトボディに 220W モータを搭載し、強力なパワーを発揮します。操作パネルに取り付けられた振動調節コントローラによりサンプルにあわせた振動強度を生み出します。また、デジタルタイマにより振動時間を正確に設定することで操作の再現性を高めます。サンプルの粒度や特性により振動の調節が簡単にできますので、実験室や研究室での粒度測定に適合しています。

- ◎ ふるいは JIS Z-8801 の目開き（別紙カタログ参照）によりご指示下さい。別途申し受けます。
- ◎ 連続長時間運転または排出しながらご使用される場合には 300-P300S 型をご利用下さい。
- ◎ ブラシクリーナ、ノブクリーナ（別売）をふるいの中に投入することにより目詰まりを減らし、分級効果をアップさせます。




TSUTSUI SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD.

筒井理化学器械株式会社

仕様

| | | | |
|-------|--|---------|---------------------------|
| 形式 | VSS-300S 型 | モータ | 振動モータ 100V/220W |
| 適用ふるい | 試験用ふるい(JIS-Z8801) φ 300mm×深さ 60mm 5 個(受器含まず) φ 300mm×深さ 100mm 3 個(受器含まず) | デジタルタイマ | 秒単位設定 最大設定時間 99 分 59 秒 |
| 振動数 | 2,000~3,600 回/分(無負荷時) 無段調節コントローラ付き | 電源 | 100V/250VA |
| 振幅 | 約 3mm | 寸法本体 | W420×D350×H271.5 |
| | | 重量 | 約 40Kg |

操作パネル

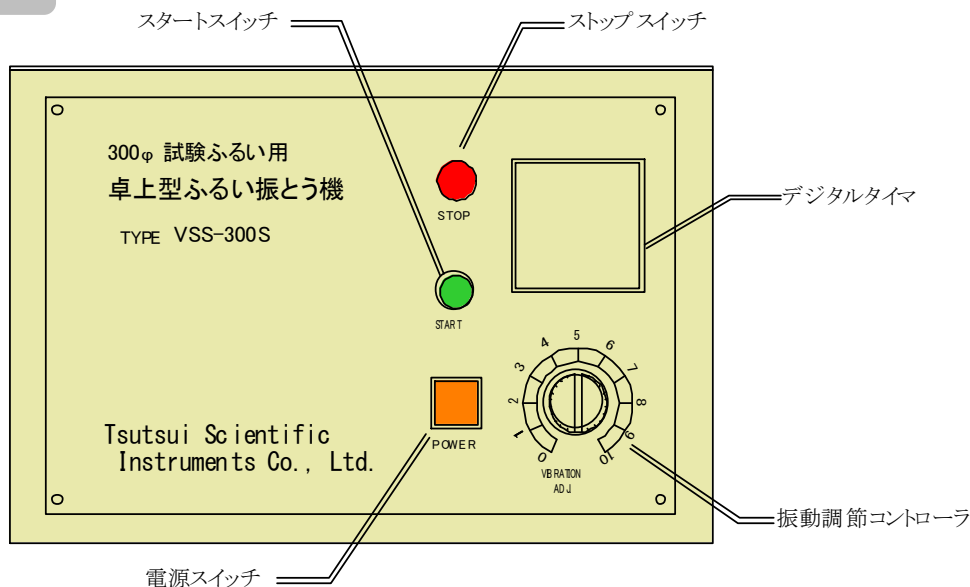

ご注意

- ※ 本製品にふるいは付属しておりません。
- ※ 連続使用は、VSS-P300S 型をご利用下さい。
- ※ ふるい段数が 5 段以上の場合は、長尺ロッドを別途ご購入下さい。

お問い合わせ

筒井理化学器械株式会社

〒110-0003 東京都台東区根岸 1-1-31

TEL 03(3845)2011 FAX 03(3842)5852

E-mail sales@e-tsutsui.com